

# BILANCIA DIGITALE PARLANTE



## Manuale di istruzioni

La bilancia da bagno annuncia chiaramente il peso in kg. Basta salire sulla bilancia parlante ed essa annuncia il tuo peso in kg con voce femminile chiara:

"Il peso è \*\*\* chilogrammi.

Il peso viene visualizzato sul grande lettore LCD.

Dopo dieci secondi di non utilizzo, la bilancia si spegne automaticamente.

## **BATTERIE**

Non utilizzare batterie vecchie e nuove. Non utilizzare contemporaneamente batterie alcaline, standard (carbonio-zinco) o ricaricabili (ni-cad, ni-mh, ecc.). Pulire i contatti della batteria e quelli del dispositivo prima dell'installazione.

## **PULIZIA**

1. Pulire le parti esposte con un panno morbido e leggermente umido. Per rimuovere le macchie, utilizzare un sapone delicato. Non utilizzare detergenti e acqua in eccesso.
2. Non immergere la bilancia in acqua.
3. Non tentare di lubrificare o aprire l'involucro della bilancia poiché ciò invalida la garanzia.
4. Trattare con cura la bilancia per assicurare le migliori prestazioni. Contiene parti elettroniche sensibili.
5. Questa bilancia è progettata per pesi compresi da 12 a 180 chilogrammi con intervalli di 0,1 chilogrammi.
6. Non conservare la bilancia dove si tengono sostanze chimiche di pulizia. I vapori provenienti da alcuni prodotti domestici possono influenzare i componenti elettronici della bilancia. Non conservare la bilancia appoggiata su un fianco o con oggetti appoggiati sul piano di vetro.
7. Rimuovere le batterie se la bilancia non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.

## **NOTE**

Questa bilancia è progettata solo per uso personale, non per uso professionale, commerciale o industriale. Riciclare o smaltire le batterie secondo le normative locali.


# ISTRUZIONI PER L'USO

## 1. Prima dell'utilizzo


Aprire il vano delle batterie sul retro della bilancia.

a) Inserire le batterie assicurandosi che i terminali +/- siano corretti.

b)

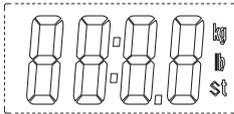

c) Richiudere e attendere che venga pronunciato "CIAO" e visualizzato "0.00 kg".

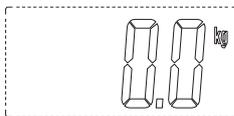


d) Di lato al vano batterie c'è il selettore per attivare/disattivare la voce.

## 2. Misurazione

a) Mettere la bilancia sul pavimento.

Salire sulla bilancia, che si accenderà ed effettuerà la pesatura annunciando: "**Il vostro peso è \*\*\* kg**". La bilancia si spegnerà dopo circa 10 secondi. Se si desidera ripetere la misurazione, scendere e risalire.

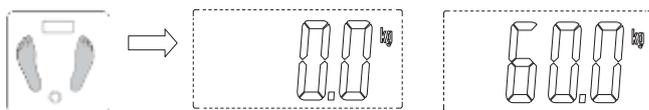

### NOTE:

Assicurarsi che la bilancia sia su una superficie piana. Evitate tappeti e superfici morbide.


Il piano di vetro della bilancia è scivoloso se è bagnato.

La bilancia non è impermeabile. Non esporre all'umidità.


Pulire la bilancia con un panno leggermente umido. Quando si utilizza la bilancia per la prima volta o quando si cambia posizione, riavviarla due volte senza alcun oggetto sul piano. Queste operazioni servono per calibrare la bilancia.

## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Cambiare le batterie quando sul display viene visualizzato "Lo".

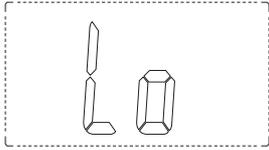

La scritta "Err" sul display indica un sovraccarico.

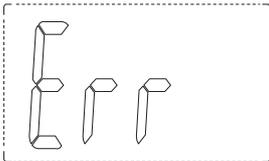

## Caratteristiche



1. Display LCD
2. Piano in vetro temperato
3. Piedini antiscivolo
4. Scomparto batteria
5. Selettore per attivare/disattivare la voce

Accensione e spegnimento automatico

Indicatore di batterie scariche e di sovraccarico

Tolleranza di pesatura: +- 100 gr.

Dimensioni: 28 cm. x 28 cm. Spessore Vetro: 6 mm

Peso massimo: 180 Kg.

Dimensioni del display a cristalli liquidi: 7 cm. x 3 cm

2 batterie AAA non incluse